




PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PETTINE ELETTRICO ANTI PIDOCCHI ELECTRIC LICE COMB PEIGNE ÉLECTRIQUE ANTI-POUX PEINE ANTIPIOJO ELÉCTRICO

**Manuale utente - User manual
Notice d'utilisation - Manual del usuario**

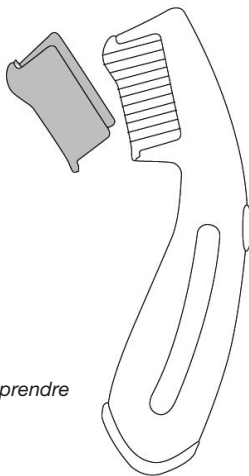

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.



Fabbricante/Manufacturer:
Gima S.p.A - 20060 Gessate (MI) - Italy
Made in P.R.C.



Indice

Introduzione.....	3
Istruzioni per la sicurezza	3
Caratteristiche	4
Descrizione apparecchio e relativi accessori	5
Installazione delle batterie	5
Pulizia e disinfezione	5
Specifiche tecniche.....	6
Funzionamento	6
Condizioni di garanzia GIMA.....	8

INTRODUZIONE

I pidocchi sono piccoli insetti privi di ali. A completo sviluppo, sono di dimensioni simili a un seme di sesamo. Dato che non possono sopravvivere al freddo, si aggrappano ai nostri capelli, tenendosi vicino al calore delle nostre teste.

I pidocchi sono innocui - anche se possono causare prurito alla testa del vostro bambino. I pidocchi sono una seccatura vecchia migliaia di anni. Fortunatamente per sbarazzarsi di loro al giorno d'oggi sono necessari soltanto dieci minuti di trattamento!

Il pettine elettrico anti pidocchi Gima è una valida opzione da considerare nel tentativo di eliminare i pidocchi, per evitare che si diffondano sui capelli e sul cuoio capelluto dei membri della vostra famiglia. Non è certo un segreto che un'infestazione di pidocchi può rendere la vita difficile per tutti in casa ma grazie alle moderne tecnologie - un pettine elettrico anti pidocchi - sbarazzarsi di questi parassiti può essere ancora più semplice.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per la vostra sicurezza, si consiglia di leggere questo manuale con molta attenzione, e osservare le seguenti istruzioni.

- Usare l'apparecchio solo come previsto, conformemente alle istruzioni fornite in questa guida.
- Questo dispositivo elettrico non è un giocattolo, tenetelo lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare con bambini al di sotto dei 3 anni.
- I bambini devono essere controllati da un adulto durante l'uso di questo dispositivo elettrico.
- In caso di pace maker, arti artificiali o qualsiasi impianto elettronico, consultare il medico prima dell'uso.
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di telefoni cellulari, forni a microonde o televisori (mantenere una distanza di più di 1 metro).
- Per le persone che soffrono di epilessia o di problemi cardiaci, l'uso di questo apparecchio è sconsigliato.
- Non utilizzare su capelli umidi, nodi di qualsivoglia genere o trecce.
- Evitare il contatto diretto con cute lesa, screpolata o secca e con orecchie, occhi e bocca.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare e non riporre su superfici calde.
- Tenere l'apparecchio lontano dall'umidità e dai liquidi.

- L'utilizzo è vietato qualora l'apparecchio risulti danneggiato, non funzioni correttamente o sia stato immerso in un liquido.
- Prevenire incidenti o danni tenendo l'apparecchio lontano da indumenti, setole, cavi, stringhe, lacci, fili, etc.
- Quando non in uso, spegnere sempre l'apparecchio.
- Rimuovere la batteria se l'apparecchio non deve essere utilizzato per lunghi periodi.

CARATTERISTICHE

Con un solo gesto, il pettine anti pidocchi Gima non solo disperde in modo efficiente, ma anche uccide pidocchi e lendini esistenti con una tensione elettrica crescente di 130-180 volt, impercettibile e innocua per la salute umana.

L'attività del pettine è indicata da un segnale acustico, con modalità differenti: un suono di tre secondi indica il funzionamento dell'apparecchio (60-90V); un breve segnale di 0,5 secondi indica il contatto con il corpo estraneo (130-180V).

Il pulsante di accensione / spegnimento è dotato di una spia, le cui modalità di lampeggiamento indicano se la batteria sia carica o scarica.

Funzione di spegnimento automatico.


Dopo 5 minuti di accensione senza utilizzo, l'apparecchio si spegnerà automaticamente per prolungare la durata della batteria.

Indicazione di batteria scarica: l'apparecchio rileva la batteria se la tensione è inferiore alla normale tensione di lavoro; l'indicatore LED s'illuminerà due volte brevemente, una volta più a lungo e il cicalino emetterà un suono continuo per 30 secondi, fino allo spegnimento automatico.


Il design impeccabile include gli accessori all'interno dell'apparecchio principale, portatili e adatti per i viaggi, non avrete il timore di perderli.

DESCRIZIONE APPARECCHIO E RELATIVI ACCESSORI

1. Accensione / Spegnimento
(premere il pulsante)
2. Copertura protettiva
3. Pettine elettrico
4. Coperchio vano batteria
5. Spazzola per la pulizia
6. Vano batteria

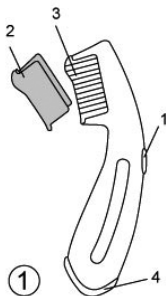

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

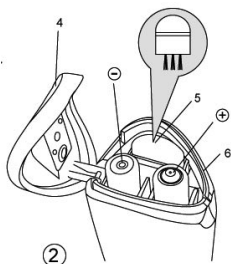

Aprire il coperchio del vano batteria sollevandolo dal punto 4.
 Inserire due batterie AAA. Rispettare la polarità (+/-) come indicato sulle pile e sul vano batteria. Un errore di polarità può danneggiare il vostro apparecchio e compromettere la garanzia.

PULIZIA E DISINFEZIONE

1. Rimuovere le batterie prima della pulizia
2. Evitare l'uso di qualsiasi liquido o detergente aggressivo per pulire l'apparecchio.

3. Pulire l'esterno dell'unità utilizzando un panno asciutto, carta o un panno morbido in tessuto, per i denti utilizzare l'apposita spazzola in dotazione per rimuovere eventuali ostruzioni.
4. Verificare che non entri acqua nel gruppo durante la pulizia e non immergere mai l'unità.
5. Conservare in un ambiente pulito, asciutto, fresco e ben areato.
6. L'esposizione diretta alla luce solare può danneggiare l'unità.


SPECIFICHE TECNICHE

Modello	24402
Alimentazione	N. 2 Batterie AAA
Corrente stand-by	$\geq 30\mu\text{A}$
Corrente massima	$\geq 30\text{mA}$
Tensione di esportazione	30 ~ 180 V
Consumo	$\geq 35\text{mA}$ durante l'utilizzo
Durata batteria	Otto ore di uso continuo
Spegnimento automatico	Sì
Dimensioni	177 x 34 x 39 mm
Peso	200 gr
Certificazioni	CE, RoHS

FUNZIONAMENTO

1. Premere il pulsante Accensione / Spegnimento n. 1, tenere premuto per due secondi per azionare l'apparecchio.
L'indicatore LED si accenderà, il cicalino emetterà un suono lungo tre secondi per indicare il funzionamento.
2. Utilizzare come un normale pettine. Accertarsi di usare l'apparecchio su capelli asciutti. Sciogliere nodi e trecce prima dell'utilizzo.
3. Durante il funzionamento, il LED si accenderà e il cicalino suonerà una volta ogni tre secondi.
4. Quando i denti entreranno in contatto con un pidocchio o un uovo, il segnale acustico si trasformerà da breve a veloce e l'indicatore LED lampeggerà rapidamente.
4-1. La tensione dei denti eliminerà il corpo estraneo.

- 4-2. Assicurarsi di pulire accuratamente il pettine con l'apposita spazzola dopo ogni utilizzo per poterlo riutilizzare continuamente.
5. Dopo ogni utilizzo, spegnere l'apparecchio e pulire il pettine a fondo con l'apposita spazzola. Rimettere il coperchio protettivo n. "2" sul pettine prima di riporlo nella confezione.

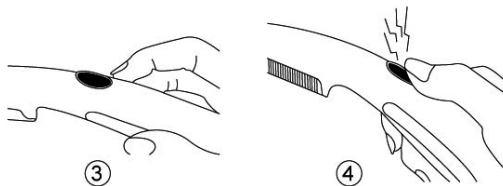



Smaltimento: *Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alla legge nazionali.*

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.

Table of contents

Introduction.....	10
Safety instruction.....	10
Special features.....	11
Description of the appliance and the supplied accessories.....	11
Installation of the batteries.....	12
Cleaning and maintenance.....	12
Specifications.....	12
Operation.....	13
GIMA warranty conditions.....	14

INTRODUCTION

Head lice are tiny, wingless insects. When fully grown, they're similar in size to a sesame seed. Because they can't survive the cold, they cling to our hair, keeping close to the warmth of our heads.

Head lice are harmless – though they can cause your child's head to itch. Head lice have been making a nuisance of themselves for thousands of years. Fortunately, getting rid of them nowadays only takes a ten minute treatment time!

The Gima electric lice comb is one viable option to consider in the quest of eradicating head lice so they will stop spreading through your family member's hair and scalp. It is certainly no secret that an infestation of lice can make life difficult for everyone in the household, but thanks to modern technology – an electric lice comb, the process of getting rid of these pests can be just a bit easier.

SAFETY INSTRUCTION

For your safety, it is recommended that you read this User Guide very carefully, and comply with the following instruction.

- Use the appliance only as intended in accordance with the instructions provided in this guide.
- This electric device is not a toy, avoid the reach of children.
- The child who is under the age of 3, is not suited for this appliance.
- Children should be supervised by an adult while using this electric device.
- Consult the physician before using the unit, if you have a pace maker, artificial limbs or any electronic implant.
- Do not operate this unit close to a mobile telephone, a microwave oven, or a television set (away more than 1 meter).
- The persons who suffer from epilepsy or heart disease are not recommended to use this appliance.
- Do not use this unit on moisten hair or any undo knots or braids.
- Avoid the wounded, cracked or dry skin, or direct contact with your ears, eyes and mouth.
- Avoid the direct exposure of sunlight, and upon any hot surface.
- Keep the unit away from moisture, or any liquid.
- Do not use the unit, if the housing or comb is damaged, if the unit does not function properly or if it has been immersed in liquid.
- Prevent accident or damage to the unit by keeping the unit away from clothing, bristles, wires, strings, shoelaces, threads etc.

- Always switch off the unit when not in use.
- Remove the battery if the appliance is not to be used for an extended period.

SPECIAL FEATURES

Gima lice comb does not only dispel but also efficiently kill the existing head lice and nits with a quickly increasing electrical voltage of 130-180 Volts, which is imperceptible and harmless to humans.

Comb activity is indicated by an audible signal, which provides different sounds: one sound per three seconds indicates the functional unit (60-90V); the short, sharp buzzer 1 second sound per 0.5 second indicates the contact with the intruder (130-180V).

Incomparable brilliant indicator setting in the On/Off switch button: different level of scintillations for distinguishing the functional and low battery. Automatic switch off function.


The comb will switch off automatically without any operation after 5 minutes for extending the battery life.

Low battery indication: the unit will detect the battery if the voltage is lower than normal working voltage, LED indicator will glitter twice briefly, once longer; the buzzer will sound continuously for 30 seconds till switching off automatically.

Impeccable design for containing the accessories inside the main appliance, portable and suitable for travel, without the trouble of missing the supplied accessories.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND THE SUPPLIED ACCESSORIES


1. On/Off switch (press button)
2. Protective cover
3. Electric comb
4. Lid of the battery compartment
5. Cleaning brush
6. Battery compartment

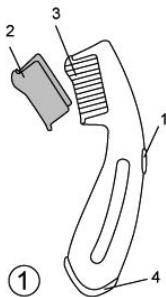

INSTALLATION OF THE BATTERIES

Open the lid protecting the battery by lifting the point “4”, the lid connects the housing with one part to avoid the concern of missing the lid. Insert two AAA batteries, observe the proper polarity (+/-) of the batteries and on the battery compartment.

A polarity error can damage your appliance and compromise the guarantee.

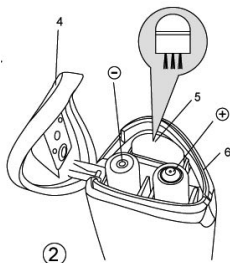

CLEANING AND MAINTENANCE



1. Remove the batteries before cleaning the appliance.
2. Avoid using any liquid or strong detergents to scrub the unit.
3. For the housing, use a dry, soft paper or fabric cloth to clean. For the teeth, use the accessory of cleaning brush to remove the clogs.
4. Make sure no water gets into the unit while cleaning and never immerse the unit in water.
5. The storage should be in a clean, dry and cool, ventilated location.
6. Direct exposure to sunlight will damage the unit.

SPECIFICATIONS

Model name	24402
Power supply	AAA battery x 2
Standby Current	$\geq 30\mu\text{A}$
Full current	$\geq 30\text{mA}$
Export Voltage	30 ~ 180 V
Consumption	$\geq 35\text{mA}$ during use
Battery life	Eight hours in continuous use
Auto switch off	Yes
Dimension	177 x 34 x 39 mm
Weight	200g
Certificate	CE, RoHS

OPERATION

1. Press the On/Off switch button "1", maintain it for two seconds for operating the appliance. LED indicator will light on, the buzzer will hum three seconds long to indicate the operation.
2. Use the appliance as a normal comb. Make sure to use the unit on dry hair. Undo the knots or braids before using the unit.
3. While operating the unit, LED will light on and also the buzzer will sound once every three seconds.
4. The buzzer will turn into a short and quick humming sound, the LED indicator flashes quickly while the teeth contact with a louse or egg.
 - 4-1 The voltage of the teeth will extinguish the intruder.
 - 4-2 Make sure to thoroughly clean the comb with the cleaning brush after every usage to re-operate the comb continually.
5. After every usage, remember to switch off the unit and thoroughly clean the comb with cleaning brush, keep the protective cap "2" back on the unit during storage.

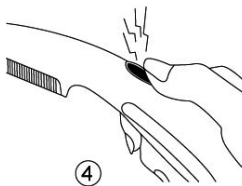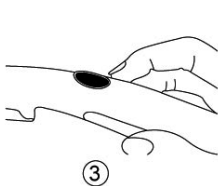



***Disposal:** The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment. For further information on recycling points contact the local authorities, the local recycling center or the shop where the product was purchased. If the equipment is not disposed of correctly, fines or penalties may be applied in accordance with the national legislation and regulations.*

GIMA WARRANTY CONDITIONS

Congratulations for purchasing a GIMA product. This product meets high qualitative standards both as regards the material and the production. The warranty is valid for 12 months from the date of supply of GIMA. During the period of validity of the warranty, GIMA will repair and/or replace free of charge all the defected parts due to production reasons. Labor costs and personnel traveling expenses and packaging not included. All components subject to wear are not included in the warranty. The repair or replacement performed during the warranty period shall not extend the warranty. The warranty is void in the following cases: repairs performed by unauthorized personnel or with non-original spare parts, defects caused by negligence or incorrect use. GIMA cannot be held responsible for malfunctioning on electronic devices or software due to outside agents such as: voltage changes, electro-magnetic fields, radio interferences, etc. The warranty is void if the above regulations are not observed and if the serial code (if available) has been removed, cancelled or changed. The defected products must be returned only to the dealer the product was purchased from. Products sent to GIMA will be rejected.

Table des matières

Introduction.....	16
Instructions de sécurité.....	16
Caractéristiques spéciales.....	17
Description de l'appareil et des accessoires fournis.....	18
Insertion des piles.....	18
Nettoyage et entretien.....	18
Spécifications.....	19
Fonctionnement.....	19
Conditions de garantie GIMA.....	20

INTRODUCTION

Les poux de tête sont de minuscules insectes sans ailes. À l'âge adulte, ils ont une taille similaire à une graine de sésame. Étant donné qu'ils ne peuvent pas survivre au froid, ils se cramponnent à nos cheveux, en restant près de la chaleur de nos têtes.

Les poux de tête sont inoffensifs, même s'ils peuvent causer des démangeaisons à la tête de votre enfant. Les poux de tête ont nui à eux-mêmes pendant des milliers d'années. Heureusement, aujourd'hui, pour se débarrasser d'eux, il suffit d'un traitement de seulement 10 minutes! Le peigne électrique anti-poux de Gima est une option viable à prendre en considération dans la bataille contre les poux de tête afin de les empêcher de se propager entre les membres et les crânes de votre famille. Ce n'est certainement pas un secret qu'une infestation de poux peut rendre la vie difficile pour tous les occupants de la maison, mais grâce à la technologie moderne, un peigne électrique anti-poux, se débarrasser de ces insectes nuisibles est juste un peu plus simple.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'utilisation, et de respecter les instructions suivantes.

- Utiliser l'appareil uniquement avec l'intention de respecter les instructions fournies dans ce manuel.
- Ce dispositif électrique n'est pas un jouet, empêcher à l'enfant de le manipuler.
- Cet appareil n'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans.
- Les enfants doivent être supervisés par un adulte lors de l'utilisation de ce dispositif électrique.
- Consulter un médecin avant d'utiliser ce produit, au cas où vous avez un pacemaker, des membres artificiels ou un implant électronique.
- Ne pas faire fonctionner ce produit près d'un téléphone portable, d'un four à micro-ondes, ou d'un téléviseur (à moins d'un mètre de distance).
- L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée aux personnes souffrant d'épilepsie ou de maladies cardiaques.
- Ne pas utiliser ce produit sur des cheveux humides, emmêlés ou sur des tresses.
- Éviter le contact avec des blessures, la peau craquelée ou sèche, et le contact direct avec les oreilles, les yeux et la bouche.
- Éviter l'exposition directe au soleil et sur les surfaces chaudes.

- Tenir le produit éloigné de l'humidité et de tout liquide.
- Ne pas utiliser le produit au cas où le boîtier ou le peigne serait endommagé, au cas où le produit ne fonctionnerait pas correctement ou au cas où il aurait été en contact avec du liquide.
- Éviter les accidents ou les dommages au produit en le tenant éloigné des vêtements, des poils, des câbles, des ficelles, des lacets, des fils, etc.
- Toujours l'éteindre lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Enlever la pile au cas où l'appareil ne serait pas utilisé pendant une longue période.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Le peigne anti-poux de Gima peut non seulement chasser, mais également tuer efficacement les poux de tête et leurs lentes à l'aide d'un voltage électrique, de 130 à 180 volts, qui augmente rapidement et qui est imperceptible et inoffensif pour l'être humain.

L'activité du peigne est indiquée par un signal acoustique qui produit différents sons : un son toutes les trois secondes indique le fonctionnement du produit (60-90 V) ; un bip bref et aigu d'une seconde toutes les demi secondes indique le contact avec l'intrus (130-180 V).

Un indicateur intelligent et incomparable situé dans l'interrupteur On/Off : différents niveaux de scintillements pour distinguer la pile à charge pleine ou déchargée.

Fonction arrêt automatique.


Si le produit fonctionne pendant 5 minutes sans travailler, il s'éteindra automatiquement pour préserver la durée de vie de la pile.

Lorsque le niveau de charge de la pile est bas, le produit détectera la pile et si le voltage est plus bas que le voltage normal de travail, l'indicateur à LED clignotera rapidement deux fois, puis une fois plus longtemps ; le bip sonnera en continu pendant 30 sec. jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement.

Design irréprochable, tous les accessoires sont contenus dans l'appareil principal, portatif et facile à transporter, sans se préoccuper d'oublier les accessoires fournis.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES FOURNIS


1. Interrupteur On/Off (bouton)
2. Couvercle de protection
3. Peigne électrique
4. Couvercle du compartiment piles
5. Brosse de nettoyage
6. Compartiment pile

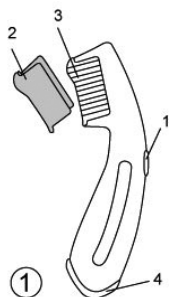

INSTALLATION DES PILES

Ouvrir le couvercle de protection de la pile en soulevant le point « 4 », le couvercle est relié au compartiment par une pièce pour éviter de le perdre.

Insérer deux piles AAA, respecter les polarités (+/-) des piles comme cela est indiqué sur les piles et sur le compartiment piles. Une erreur de polarité peut endommager votre appareil et compromettre la garantie.

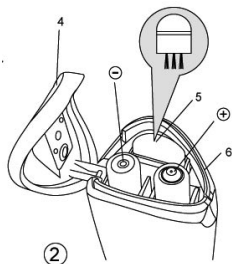

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


1. Enlever les piles avant de nettoyer l'appareil.
2. Éviter d'utiliser des détergents liquides ou puissants pour nettoyer le produit.
3. En ce qui concerne le compartiment, utiliser du papier doux et sec ou du tissu pour nettoyer.
En ce qui concerne les dents, utiliser l'accessoire brosse de nettoyage pour enlever les saletés.
4. S'assurer que l'eau ne s'introduise pas dans le produit pendant le nettoyage, et ne jamais immerger le produit dans l'eau.
5. Le ranger dans un endroit propre, sec et frais, et ventilé.
6. Une exposition directe au soleil endommagera le produit.

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle	24402
Alimentation	2 Piles AAA
Stand-by Courant	$\geq 30 \mu\text{A}$
Courant maximum	$\geq 30 \text{ mA}$
Voltage en sortie	30 ~ 180 V
Consommation	$\geq 35 \text{ mA}$ pendant l'utilisation
Durée de vie des piles	8 heures en utilisation continue
Arrêt automatique	Oui
Dimensions	177 x 34 x 39 mm
Poids	200 g
Certificat	CE, RoHS

FONCTIONNEMENT

- Appuyer sur l'interrupteur On/Off « 1 », maintenir la pression pendant deux sec. pour démarrer l'appareil.
L'indicateur à LED démarrera, un bip bourdonnera pendant trois sec. pour indiquer l'état de marche.
- Utiliser l'appareil comme un peigne normal. S'assurer que les cheveux soient secs. Démêler les nœuds et défaire les tresses avant d'utiliser le produit.
- Pendant l'utilisation du produit, la LED s'allumera et le bip sonnera une fois toutes les trois sec.
- Le bip redeviendra un bref et rapide bourdonnement, l'indicateur à LED clignote rapidement lorsque les dents entrent en contact avec un pou ou un œuf.
 - Le voltage des dents exterminera l'intrus.
 - S'assurer de très bien nettoyer le peigne avec la brosse de nettoyage après chaque utilisation pour pouvoir réutiliser le peigne continuellement.
- Après chaque utilisation, se souvenir d'éteindre le produit et de très bien nettoyer le peigne avec la brosse de nettoyage, remettre le couvercle de protection « 2 » sur le produit avant de le ranger.

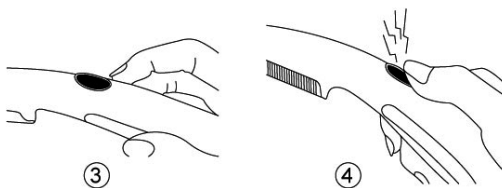

Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service local de collecte et de traitement des déchets ou le point de vente du produit. Toute personne contrevenant aux lois nationales en matière d'élimination des déchets est passible de sanctions administratives.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits. Ce produit est conçu de manière à garantir des standards qualitatifs élevés tant en ce qui concerne le matériau utilisé que la fabrication. La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la fourniture GIMA. Durant la période de validité de la garantie, la réparation et/ou la substitution de toutes les parties défectueuses pour causes de fabrication bien vérifiées, sera gratuite. Les frais de main d'oeuvre ou d'un éventuel déplacement, ainsi que ceux relatifs au transport et à l'emballage sont exclus. Sont également exclus de la garantie tous les composants sujets à usure. La substitution ou réparation effectuées pendant la période de garantie ne comportent pas le prolongement de la durée de la garantie. La garantie n'est pas valable en cas de: réparation effectuée par un personnel non autorisé ou avec des pièces de rechange non d'origine, avaries ou vices causés par négligence, chocs ou usage impropre. GIMA ne répond pas des dysfonctionnements sur les appareillages électroniques ou logiciels causés par l'action d'agents extérieurs tels que: sautes de courant, champs électromagnétiques, interférences radio, etc. La garantie sera révoquée en cas de non respect des prescriptions ci-dessus et si le numéro de matricule (si présent) résultera avoir été enlevé, effacé ou altéré. Les produits considérés défectueux doivent être rendus seulement et uniquement au revendeur auprès duquel l'achat a été effectué. Les expéditions qui seront envoyées directement à GIMA seront repoussées.

Índice

Introducción.....	22
Instrucciones de seguridad	22
Características especiales	23
Descripción del aparato y de los accesorios suministrados.....	24
Colocación de las pilas	24
Limpieza y mantenimiento.....	24
Especificaciones.....	25
Funcionamiento.....	25
Condiciones de garantía GIMA.....	26

INTRODUCCIÓN

Los piojos son pequeños insectos sin alas. Cuando están desarrollados, tienen un tamaño similar al de una semilla de sésamo. Debido a que no pueden sobrevivir al frío, se aferran a nuestro cabello, manteniéndose cerca del calor de nuestra cabeza.

Los piojos son inofensivos – aunque pueden causar picor en la cabeza de su niño.

Los piojos van siendo una molestia desde hace miles de años.

¡Afortunadamente, hoy en día para deshacerse de ellos sólo necesitará diez minutos de tratamiento!

El peine antipiojos eléctrico de Gima es una opción viable a considerar en la búsqueda de un método para erradicar los piojos para que dejen de difundirse entre el cabello y el cuero cabelludo de su familia. Ciertamente no es secreto que una infestación de piojos puede hacer la vida difícil para todos en el hogar, pero gracias a la tecnología moderna - una peine antipiojos eléctrico, el proceso de deshacerse de estas plagas puede ser un poco más fácil.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para su seguridad, se recomienda que lea esta Guía del Usuario con mucha atención, y respete las siguientes instrucciones.

- Utilice el aparato sólo para su uso previsto, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Este dispositivo eléctrico no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no se debe usar en niños de menos de 3 años de edad.
- Los niños que utilizan este aparato eléctrico deben hacerlo bajo la supervisión de un adulto.
- Consulte a su médico antes de utilizar este aparato si usted lleva un marca pasos, miembros artificiales o cualquier otro implante electrónico.
- No utilice esta unidad cerca de un teléfono móvil, un horno microondas, o un televisor (a una distancia de 1 al menos metro)
- No se recomienda el uso de este aparato en personas que sufren epilepsia o alguna enfermedad del corazón.
- No use este aparato sobre el cabello mojado, con nudos o trenzas.
- Evite la piel herida, agrietada o seca, o el contacto directo con orejas, ojos y boca.
- Evite la exposición directa a la luz solar, y cualquier superficie caliente.

- Mantenga la unidad lejos de humedad, o cualquier líquido.
- No utilice la unidad, si el envoltorio o el peine están dañados, si la unidad no funciona correctamente o si ha sido sumergido por el líquido.
- Prevenga accidentes o daños a la unidad, manteniendo la unidad lejos de ropa, cepillos, cables, cuerdas, cordones de zapatos, hilos etc.
- Apague siempre la unidad cuando no esté en uso.
- Retire las pilas si no se va a utilizar el aparato por un periodo prolongado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El peine antipiojos de Gima puede no solo disipar sino también matar de manera eficiente los piojos y las liendres existentes con una tensión eléctrica de 130-180 voltios que aumenta rápidamente, que es imperceptible e inócua para las personas.

La actividad de peinado se indica mediante una señal audible, que proporciona sonidos diferentes: un sonido cada tres segundos indica el funcionamiento de la unidad (60-90V); un timbre corto, agudo de 1 segundo por 0,5 segundos indica el contacto con el intruso (130-180V).

Indicador brillante incomparable en el interruptor On/Off: nivel diferente de destellos para distinguir entre el funcionamiento y la batería baja.

Función de apagado automático.


Al cabo de 5 minutos de uso sin trabajo efectivo, la unidad se apagará automáticamente para prolongar la duración de las pilas.

En caso de batería baja, la unidad detecta la batería si el voltaje es inferior a la tensión normal de trabajo, el indicador LED destellará dos veces brevemente, una vez más largo; el zumbido sonará de modo continuo durante 30 segundos, hasta el apagado automático.

Diseño impecable para contener los accesorios dentro del aparato principal, portátil y cómodo para viajar sin la inquietud de perder los accesorios suministrados.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS SUMINISTRADOS


1. Interruptor On/Off (pulse el botón)
2. Cubierta de protección
3. Peine eléctrico
4. Tapa del compartimento de las pilas
5. Cepillo de limpieza
6. Compartimento de las pilas

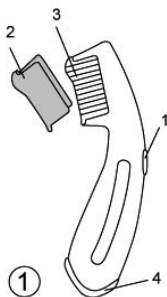

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Abra la tapa de protección de las pilas subiendo el punto "4", la tapa está conectada al envoltorio en un punto para evitar la posibilidad de que se pierda.

Inserte dos pilas AAA, observe la polaridad correcta (+/-) de las pilas como se indica en las propias pilas y en el compartimento. Un error de polaridad puede dañar el aparato y comprometer la garantía.

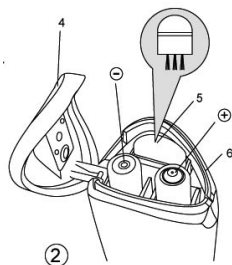

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


1. Retire las pilas antes de limpiar el aparato
2. Evite usar detergentes líquidos o fuertes para fregar la unidad.
3. Para el envoltorio, utilice un papel o un trapo suave para limpiar.
Para los dientes, utilice el cepillo de limpieza para eliminar los restos.
4. Asegúrese de que no entre agua en la unidad mientras se limpia, y nunca sumerja la unidad en agua.
5. El almacenamiento debe hacerse en un lugar ventilado limpio, seco y fresco.
6. La exposición directa a la luz solar dañará la unidad

ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo	24402
Alimentación	2 pilas AAA
Corriente de standby	$\geq 30\mu\text{A}$
Corriente máxima	$\geq 30\text{mA}$
Voltaje de Exportación	30 ~ 180 V
Consumo	$\geq 35\text{mA}$ durante el uso
Vida de la pila	Ocho horas de uso continuado
Apagado automático	Sí
Dimensión	177 x 34 x 39 mm
Peso	200g
Certificado	CE, RoHS

FUNCIONAMIENTO

1. Pulse el interruptor On/Off “1”, durante dos segundos para encender el aparato.
El indicador LED se encenderá, el zumbador emitirá un ruido por tres segundos para indicar que está listo.
2. Utilizar el aparato como un peine normal. Asegúrese de usar la unidad en el cabello seco. Deshaga los nudos o trenzas antes de usar la unidad.
3. Mientras utiliza la unidad, el LED se estará encendido y el zumbador sonará una vez cada tres segundos.
4. El zumbido se volverá un sonido corto y rápido, el indicador LED destellará rápidamente cuando los dientes entren en contacto con un piojo o una liendre.
 - 4-1. La tensión de los dientes matará al intruso
 - 4-2. Asegúrese de limpiar a fondo el peine con el cepillo de limpieza después de cada uso para volver a hacer funcionar el peine de modo continuo.
5. Después de cada uso, no olvide apagar la unidad y limpiar a fondo el peine con el cepillo de limpieza, luego coloque la tapa de protección “2” en el peine antes de guardarlo.

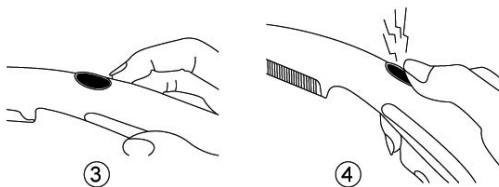

Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. Para más información sobre los lugares de recogida, contactar el propio ayuntamiento de residencia, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda en la que se compró el producto. En caso de eliminación equivocada podrían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro. Este producto cumple con elevadas normas cualitativas, tanto en el material como en la fabricación. La garantía es válida por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante el periodo de vigencia de la garantía se procederá a la reparación y/o sustitución gratuita de todas las partes defectuosas por causas de fabricación bien comprobadas, con exclusión de los gastos de mano de obra o eventuales viajes, transportes y embalajes. Están excluidos de la garantía todos los componentes sujetos a desgaste. La sustitución o reparación efectuada durante el periodo de garantía no tienen el efecto de prolongar la duración de la garantía. La garantía no es válida en caso de: reparación efectuada por personal no autorizado o con piezas de recambio no originales, averías o vicios causados por negligencia, golpes o uso impropio. GIMA no responde de malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software derivados de agentes externos como: oscilaciones de tensión, campos electromagnéticos, interferencias radio, etc. La garantía decae si no se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente) se ha quitado, borrado o cambiado. Los productos considerados defectuosos tienen que devolverse solo al revendedor al que se le compró. Los envíos realizados directamente a GIMA serán rechazados.

