



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Activum ginocchiera corta aperta in neoprene con aste articolate policentriche a controllo f-e

**Codice di riferimento:** PR3-9429A

**Marca:** RO+TEN

**Prezzo:** 157.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR3-9429A-XS	XS	157.3€
COD PR3-9429A-S	S	157.3€
COD PR3-9429A-M	M	157.3€
COD PR3-9429A-L	L	157.3€
COD PR3-9429A-XL	XL	157.3€
COD PR3-9429A-XXL	XXL	157.3€

È un dispositivo medico, leggero e confortevole utile alla stabilizzazione latero/mediale del ginocchio. La struttura in neoprene svolge un'azione benefica e termoriscaldante, garantendo una naturale distribuzione delle forze di compressione. Le asole in pelle (presenti sulle guaine superiori) agevolano l'applicazione del tutore ed il foro a livello del cavo popliteo permette al sudore in eccesso di defluire, evitando il surriscaldamento ed eventuali irritazioni della pelle. Le aste articolate con possibilità di regolazione permettono, in caso di necessità, di limitare la flessione-estensione accompagnando e proteggendo l'articolazione durante il movimento. Di veloce applicazione, è indicato sia per la

riabilitazione che per la normale attività sportiva.

medicalortho

---

### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Guaine con apertura centrale per l'inserimento delle aste articolate
- Rinforzo peritroleo
- Articolazioni policentriche con regolazione della flessione-estensione da 0° a 90° (0°-15°-30°-60°-90°)
- Cinturini a velcro con chiusura lineare
- Asole di presa al bordo superiore per l'applicazione
- Lavabile

### INDICAZIONI

- Postumi dei traumi distorsivi del ginocchio
- Condromalacia rotulea associata a lassità dei legamenti
- Instabilità latero-mediale
- Prevenzione dei traumi distorsivi del ginocchio e della rotula
- Instabilità artrosica
- Coadiuvante nella terapia del ginocchio artrosico non operabile

taglia

XS S M L XL XXL


circonf. centro ginocchio cm

30/3	33/3	36/3	39/4	43/4	48/5
3	6	9	3	8	6

lunghezza cm

33 33 33 33 33 33

ambidestra

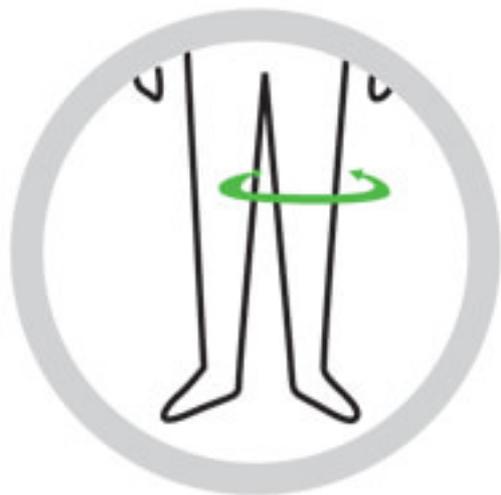

 **Acquista subito**