



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## **C11-C12 Clubax Regolabile** Ortesi regolabile multidirezionale per la correzione delle malformazioni congenite degli arti inferiori

**Codice di riferimento:** C11-C12 Clubax

**Marca:** TIELLE CAMP

**Prezzo:** 483.2€

<b>Riferimento</b>	<b>Variante</b>	<b>Prezzo</b>
C11-C12 Clubax -Grande-Destra	Destra, Grande	483.2€
C11-C12 Clubax -Grande-Sinistra	Grande, Sinistra	483.2€
C11-C12 Clubax -Small-Destra	Destra, Small	483.2€
C11-C12 Clubax -Small-Sinistra	Sinistra, Small	483.2€

### **Caratteristiche**

L'ortesi Clubax è una nuova ortesi regolabile utilizzata per la correzione progressiva di prima o seconda intenzione, del piede equino-varo-addotto durante i primi 10-12 mesi di vita. Clubax è un'ortesi composta da quattro strutture separate, collegate ed articolate tra di loro per mezzo di sistemi meccanici regolabili che permettono di posizionare il piede secondo i tre piani dello spazio. Questo sistema funzionale e dinamico consente all'ortesi di adattarsi perfettamente alla morfologia dell'arto inferiore da trattare, quindi di immobilizzare e/o fissare ogni segmento dell'arto in un rapporto tridimensionale. Questa sua caratteristica inoltre consente al tutore di essere facilmente riprogrammato in riferimento alla crescita ed ai progressi terapeutici del piccolo paziente. Clubax, a differenza dei sistemi tradizionalmente utilizzati, consente una visione precisa ed immediata del grado di correzione scelto, per mettono inoltre di eliminare eventuali

disturbi trofici. Leggera ed esteticamente gradevole, l'ortesi è ben tollerata dai neonati e meglio accettata dai genitori.


---

### Indicazioni


- trattamento di prima intenzione del piede addotto-equino-varo
- piede varo
- piede supino
- trattamento di mantenimento nel post-operatorio

### Taglie disponibili


A: Distanza cavo popliteo - punta del tallone.

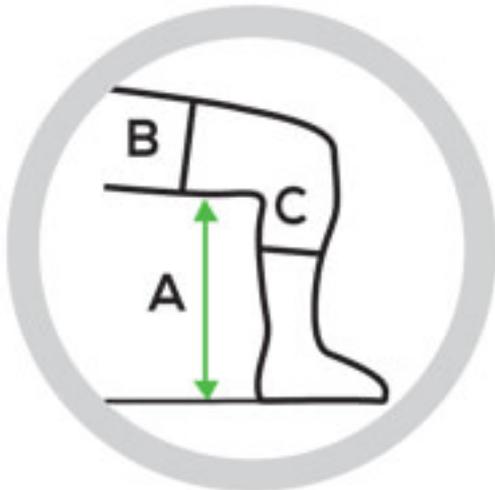

B: 1/3 circonferenza della coscia

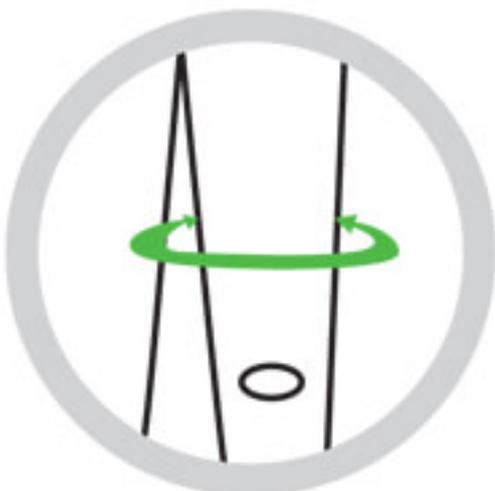

C: 1/3 circonferenza del polpaccio.

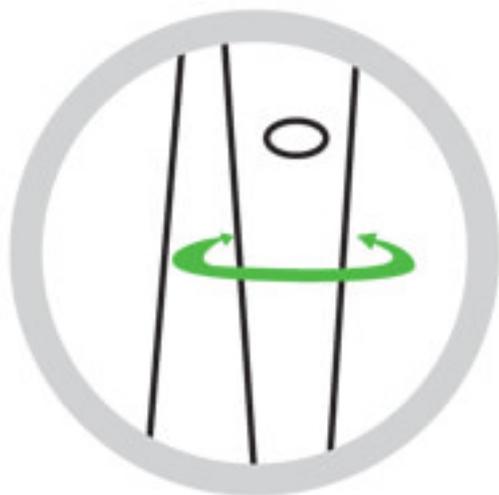

Misura piccola:

A: 7,5 - 12,5 cm;

B: 15 - 21 cm;

C: 11 -15 cm

Misura grande:

A: 9 - 15,5 cm;

B: 21 - 27 cm;

C: 15 - 20 cm

Mod. REGOLABILE

Mis. piccola

Destra C 11 R

Sinistra C 11 L

Mis. grande

Destra C 12 R

Sinistra C 12 L

 **Acquista subito**