


30551

MANIPOLO MONOUSO STERILE PER ELETTROCHIRURGIA COMANDO MANUALE DISPOSABLE STERILE HAND SWITCH ELECTROSURGICAL PENCIL

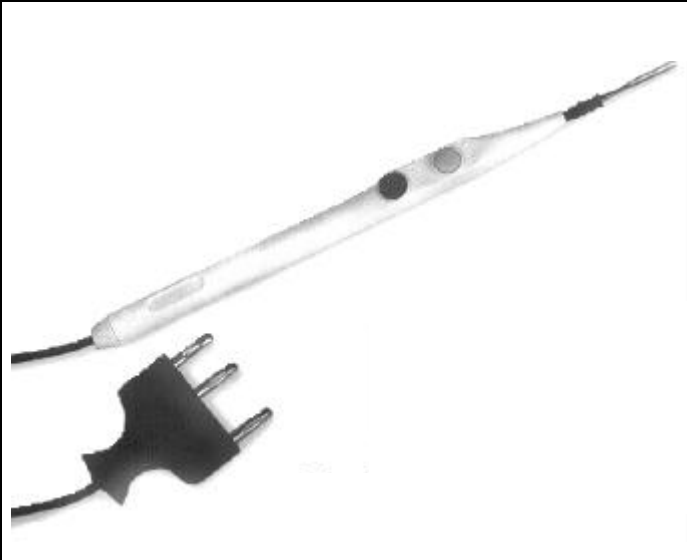

I manipoli monouso GIMA con comando manuale a doppio bottone hanno caratteristiche che li rendono altamente affidabili durante le pratiche di elettrochirurgia. L'impermeabilità del sistema è garantita da uno speciale O-ring silconico che impedisce l'infiltrazione di liquidi e protegge l'operatore da shock elettrici. Il "clic" dei pulsanti assicura l'immediato riconoscimento dell'attivazione. Il connettore Valleylab di tipo universale permette l'utilizzo dell'F4798 con la grande maggioranza dei generatori per elettrochirurgia. Il manipolo F4798 può essere collegato a generatori lontani dal campo operatorio grazie al cavo di 5 metri di cui è dotato il modello 4798/5.

GIMA TTtTT disposable electro-surgical pencils with finger tip control have features which make them absolutely reliable during electro-surgical operations. Their impermeability is guaranteed by a special silicone O-ring that does not permit any liquid infiltration and protects the operator from electrical shocks. The audible "click" of the switches assures an immediate identification of the activation. The universal Valleylab type connector permits to use the pencils with all types of electro-surgical devices using this standard connector. It is possible to connect the pencil also to "distant" devices thanks to the 5 meter connection cable of 4798/5 model

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE DESCRIPTION	Manipolo monouso comando manuale a doppio pulsante taglio-coagulo <i>Disposable electro-surgical pencil with finger tip cut-coag control</i>
MATERIALE - MATERIAL	Plastica ad alta resistenza. Prodotto senza lattice - <i>High resistance plastic. Latex-free</i>
LUNGHEZZA - LENGTH	160 mm
CAVO - CABLE	Tripolare ad alta flessibilità - <i>Tripolar, highly flexible</i>
LUNGHEZZA CAVO - CABLE LENGTH	320 cm
ATTACCO - CONNECTOR	Universale tripolare stampato tipo Valleylab - <i>Universal tripolar moulded Valleylab type</i>
ELETTRODO - ELECTRODE	Standard a lama monouso rimovibile - <i>Standard removable disposable blade</i>
STERILIZZAZIONE - STERILISATION	Ossido di Etilene - <i>ETO gas</i>
PESO - WEIGHT	80 gr.
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIB <i>Directive 93/42/EEC (D.L. 46/97). Class IIB device</i>

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di carta accoppiata con polietilene <i>Singly packaged in sealed paper pouch coupled with polyethylene</i>
CONFEZIONE DI VENDITA - SALE PACKAGING	50 pezzi in scatola di cartone - <i>50 units in carton box</i>
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temp.: 0° ÷ +50° C - Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temp.: 0° ÷ +50° C - Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>
SCADENZA - EXPIRY	24 mesi dalla data di produzione - <i>24 months from production date</i>

