



Rev. 00
maggio 2014

 PraxiMED

Scheda tecnica

Aghi bottonuti

 INTERMED
Strumenti Medicali e Ausili

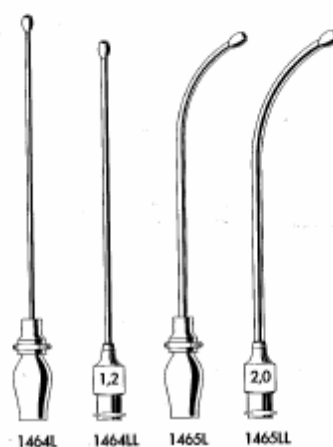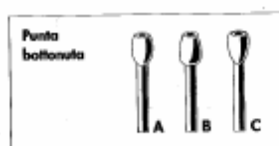

Codice	Descrizione
1464 L	Ago bottonuti retti - diametro 1,2; 2; 3 mm
1464 LL	Ago bottonuti retti - lunghezza 60; 80; 80 mm
1465 L	Ago bottonuti curvi
1465 LL	Ago bottonuti curvi

Indicazioni	
Produttore	Ernst Kratz
CND	A0199
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Aghi bottonuti per infusione ad uso chirurgico.

Descrizione

Aghi bottonuti per infusione non sterili in acciaio riusabili.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Tutti gli aghi devono essere stoccati in ambienti asciutti e al riparo dalla luce, nella confezione originale ad una temperatura tra i 10°C e i 40 °C.

Durante lo stoccaggio è necessario prestare attenzione affinché non vengano esercitate pressioni meccaniche sulle confezioni che possano danneggiare gli aghi.

Non utilizzare prodotti danneggiati, in confezioni non integre o umide.

Sterilizzazione

Prima della sterilizzazione tutti gli aghi devono subire un trattamento di pre pulizia; in questo caso, si consiglia di utilizzare solo prodotti raccomandati per la pulizia di strumenti medicali, con un valore di pH da 6 a 8.

Procedura per la sterilizzazione in autoclave: usare un processo di sterilizzazione conforme con le procedure comunemente in uso. Riponendo gli aghi in una bacinella in acciaio inossidabile.

In nessun caso, aghi devono essere sterilizzati insieme ad altri materiali quali: gomma, silicone, materie plastiche, in quanto particelle di questi materiali si potrebbero depositare sulle superfici degli aghi.

Prima di riutilizzare i prodotti Acufirm, gli stessi devono essere puliti accuratamente e bisogna controllare che la punta o la superficie degli aghi non sia danneggiata.

Gli aghi Acufirm devono essere usati esclusivamente per procedure mediche.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142