

Rev. 00
Agosto 2013


LifeMED

Scheda tecnica

CVM_T

Software per la gestione dei
pazienti ipertesi

INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali

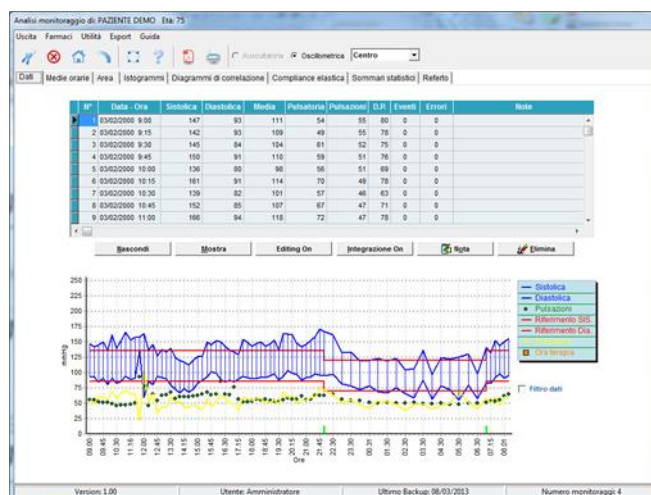

Codice	Descrizione
CVM	Software per la gestione dei pazienti ipertesi per lo strumento A&D TM-2430

Indicazioni	
Produttore	INTERMED SRL
CND	Z12050404
Repertorio	508103
Conformità	Dispositivo medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Programma di acquisizione, analisi e refertazione per i sistemi di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa A&D.

Descrizione

Software realizzato in accordo alle direttive e linee guida della società Italiana dell'Iperensione Arteriosa. Permette di archiviare, processare e stampare i monitoraggi eseguiti sotto forma di:

Monitoraggio singolo paziente

- anagrafica: inserimento dati anagrafici e anamnestici dei pazienti
- valori numerici in ordine cronologico
- medie e mediane orarie

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- calcolo dell'area ipo e iperbarica
- sommari statistici giorno, notte e 24 ore
- inserimento automatico criteri di riferimento (E.S.H. – studio Pamela – Harvest)
- trend grafico del ritmo circadiano della pressione e delle pulsazioni
- istogrammi di distribuzione dei valori
- diagrammi di correlazione
- referto personalizzato

Confronto monitoraggi singolo paziente

- analisi curve di medie orarie
- istogrammi di distribuzione dei valori
- sommari statistici giorno, notte e 24 ore
- analisi Rapporto Valle-Picco e Smoothness Index
- referto personalizzato

Confronto gruppi pazienti

- creazione gruppi mediante query: sesso – range di età – terapia farmacologica – monitoraggio fattori di rischio e patologie
- analisi curve di medie orarie
- istogrammi di distribuzione dei valori
- sommari statistici giorno, notte e 24 ore
- analisi Rapporto Valle-Picco e Smoothness Index
- referto personalizzato

Importazione file

- Importazione monitoraggi memorizzati con le precedenti versioni dei Programmi di gestione dati A&D

Esportazione file

- Esportazione monitoraggi nel formato di database del programma e in formato ASCII accessibile a pacchetti software di statistica

Caratteristiche tecniche

Sistemi di monitoraggio	TM2430
Sistemi operativi richiesti:	Windows XP Home & Pro – Vista – Window 7 e 8

Accessori opzionali

LTS	Letture a banda magnetica per tessera sanitaria
-----	---

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142