



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore per spalla Extra30°-s per rotazione esterna 30° (destro)

Codice di riferimento: PR2-EM115

Marca: RO+TEN

Prezzo: 109.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR2-EM115-S	S	109.7€
PR2-EM115-M	M	109.7€
PR2-EM115-L	L	109.7€

Caratteristiche del tutore per spalla Extra30°-s

Extra30°-s è un leggero e confortevole tutore per l'immobilizzazione della spalla progettato per garantire una perfetta stabilità dell'articolazione, la totale protezione del braccio immobilizzato assicurando leggerezza, comfort e igiene.

Specifiche tecniche

- Cuscino a cuneo in gommapiuma ad alta densità rivestita da tessuto tramato in fibra d'argento nella parte a contatto con la pelle del paziente. Permette di posizionare la spalla in rotazione esterna garantendo la stabilità dell'articolazione.
- Tiranti con fissaggio a fibbie regolabili a velcro e passante posteriore inclinato per meglio tendere la cinghia cucita. Consentono di personalizzare il tutore, assicurano il massimo comfort per il paziente ed evitano il rischio di compiere movimenti inopportuni.
- Tasca reggibraccio realizzata in materiale traspirante con chiusura a velcro per la protezione dell'arto.

- Pallina riabilitativa per mantenere in esercizio la muscolatura della mano e dell'avambraccio.
- Supporto per il pollice.
- Possibilità di rotazione esterna a 15° e 30°.


Indicazioni

- Immobilizzazione in rotazione esterna
- Intervento di plastica capsulare
- Stabilizzazioni antero/posteriori
- Post-operatorio
- Lesioni e riparazioni tessuti molli

Taglie

Taglia	S	M	L
Lunghezza avambraccio cm*	Fino a 34	35/39	40 e oltre

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso.

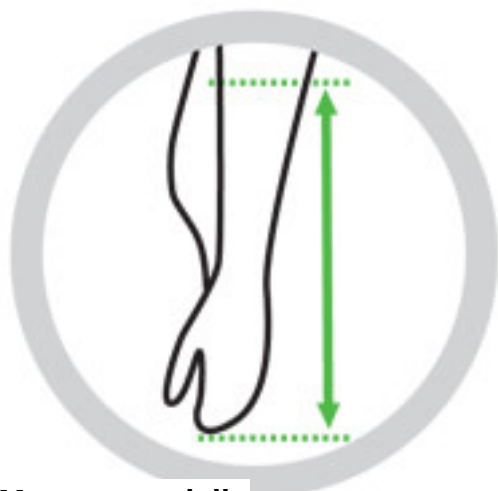

Marca e modello

RO+TEN codice PR2-EM115

Contenuto della confezione

1 pezzo -

