



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modularplus Iperestensore a tre punti con placca pubica

Codice di riferimento: PR1-P36 PLUS

Marca: RO+TEN

Prezzo: 322.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR1-P36 PLUS-S	S	322.9€
PR1-P36 PLUS-M	M	322.9€
PR1-P36 PLUS-L	L	322.9€
PR1-P36 PLUS-XL	XL	322.9€

È un dispositivo medico, funzionale e modulare, in grado di sostituire l'antiquato e pesante corsetto gessato anche nelle patologie più gravi. Può essere definito modulare perché, con le sue possibilità di regolazione e il cospicuo numero di taglie disponibili, si adatta al paziente, quasi come un prodotto su misura. Garantisce un'ottima stabilizzazione, grazie ai tre punti di spinta: due anteriori (sterno e pube) e uno posteriore (dorso-lombare). Il peso molto ridotto e le parti in appoggio ben imbottite in materiale atossico, permettono di mantenere una posizione fisiologica e naturale, senza minimamente compromettere la normale respirazione e la circolazione sanguigna. Semplice da indossare, assicura un'ottima vestibilità e una condizione di vita del tutto normale.

CARATTERISTICHE



- Struttura in lega leggera di alluminio
- Telaio a cornice
- Placca sternale fluttuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Placca pubica fissa
- Regolazione a scivolamento delle barre senza togliere le viti
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in materiale espanso rivestito di vilpelle atossica
- Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico antiallergico

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche
- Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (D11-D12-L1-L2)
- Osteomalacie fratturose
- Artrosi dorso-lombare
- Come sostitutivo del corsetto gessato

taglia	S	M	L
circonf. bacino cm	60/75	75/90	90/105
altezza iperestensore cm *	35	38	41

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

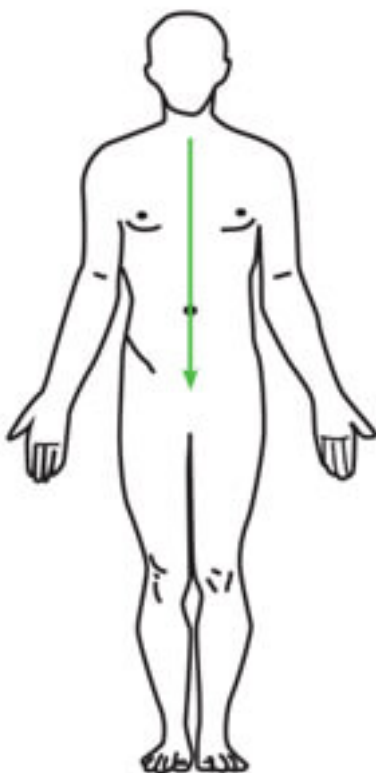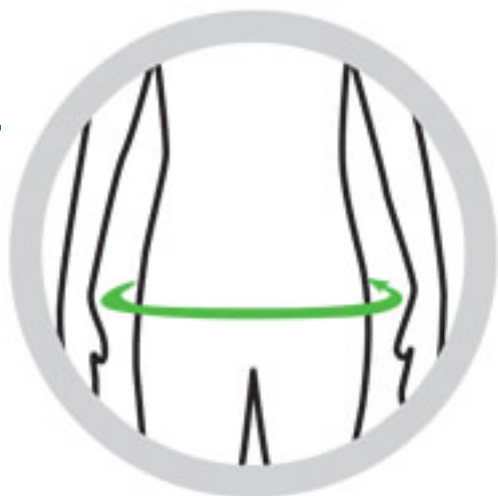

 **Acquista subito**